

测试报告

样品信息			
样品名称	八珍丸	编号	W20190527-001
样品重量	\	剂型	\
收样日期	2019/05/27	测试期间	2019/5/28-5/28
样品描述	\		
测试需求			
测试成分	含量测定		
参考标准			
参考标准	中国药典 2015 年版一部标准	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	岛津 LC-20AD

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Ultimate® Plus C18 (4.6×250mm , 5μm)
流动相:	水/乙腈=83/17
检测波长:	230nm
柱温:	25°C
流速:	1.0ml/min
进样量:	10μL
注意事项:	

● 流动相配置:

流动相: 取适量水和乙腈, 按比例在线双泵混合。

● 样品溶液的配置:

芍药苷对照溶液: 取芍药苷对照品适量, 精密称定, 加稀乙醇制成每 1mL 含 40 μg 的溶液, 即得。

供试品溶液: 取本品水蜜丸适量, 研碎, 混匀, 取约 0.3g, 精密称定, 置具塞锥形瓶中, 精密

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969


邮编: 321000

E-mail: linglan@welchmat.com

加入稀乙醇 20mL, 密塞, 称定重量, 超声处理 1 小时, 放冷, 再称定重量, 用稀乙醇补足减失的重量, 摇匀, 离心, 取上清液, 滤过, 取续滤液, 即得。


● 谱图和数据

1、芍药苷对照溶液

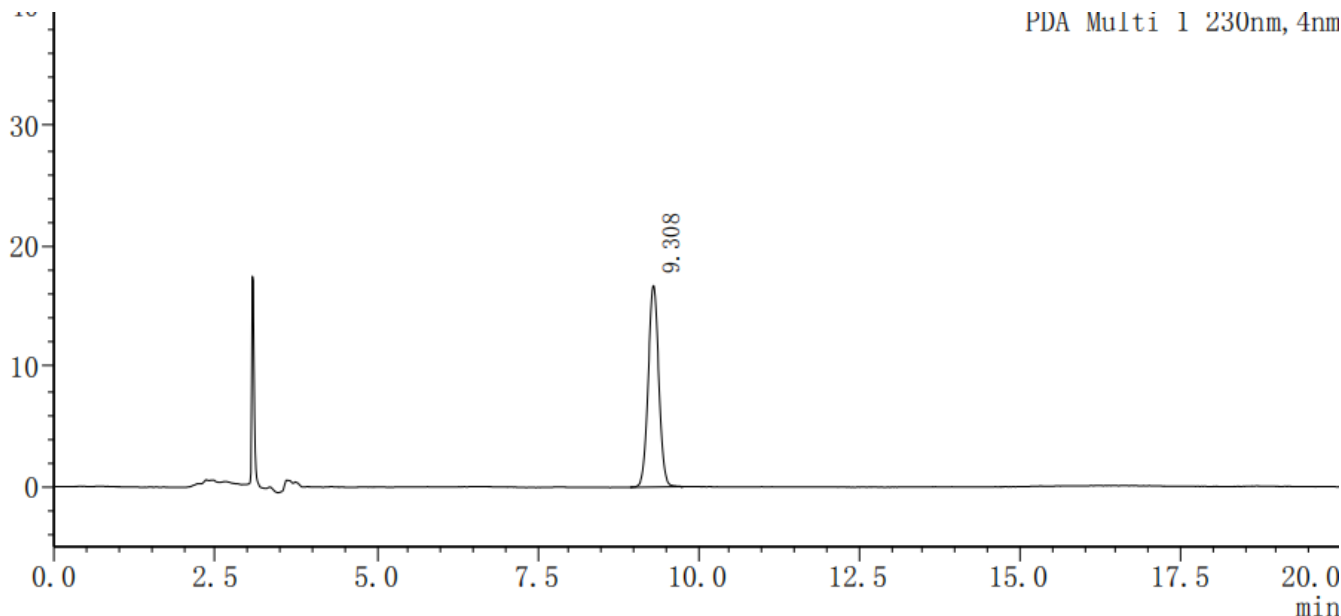

保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
9.308	191516	16776	14266	1.030	--

2、供试品溶液

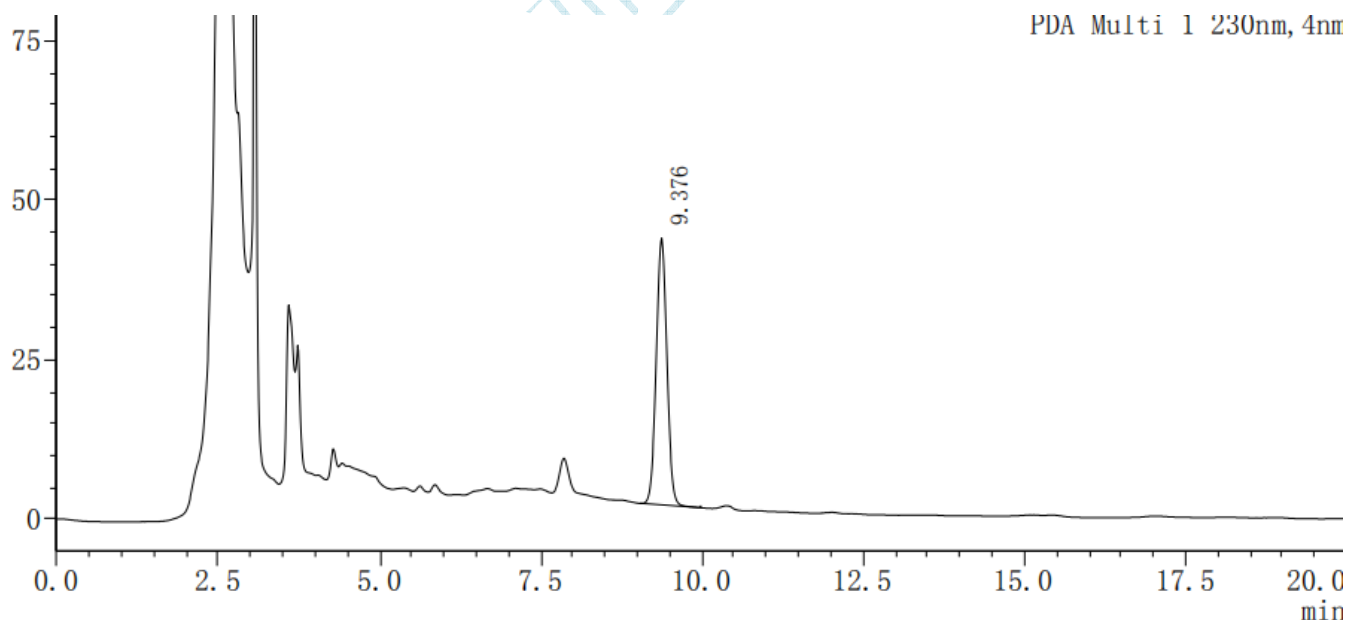

保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
9.376	482783	41800	14080	1.031	--

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969

邮编: 321000

E-mail: linglan@welchmat.com

● 结论

月旭 Ultimate® Plus C18 (4.6×250mm , 5μm), 在该色谱条件下进行测定, 可以达到检测需求, 可用于此产品的检测。

报告签字

测试: 蓝灵

日期: 2019-06-03

审核: 郭德勇

日期: 2019-06-03

月旭科技