

测试报告

样品信息			
样品名称	柴胡	编号	W20190508-001
样品重量	\	剂型	\
收样日期	2019/05/08	测试期间	2019/05/09-05/09
样品描述	\		
测试需求			
测试成分	含量测定		
参考标准			
参考标准	中国药典 2015 年版一部标准	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	安捷伦 1260

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Ultimate® Plus C18 (4.6×250mm , 5μm)		
流动相:	时间	A:水 (%)	B : 乙腈 (%)
	0	75	25
	50	10	90
	55	10	90
检测波长:	210nm		
柱温:	25°C		
流速:	1.0ml/min		
进样量:	20μL		
注意事项:			

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

邮编: 321000

Tel:400-810-6969

E-mail: linglan@welchmat.com

● 流动相配置:

流动相: 取适量水和乙腈, 按线性梯度洗脱。


● 样品溶液的配置:

对照溶液: 客户提供。


样品溶液: 客户提供。

● 谱图和数据

1、对照溶液

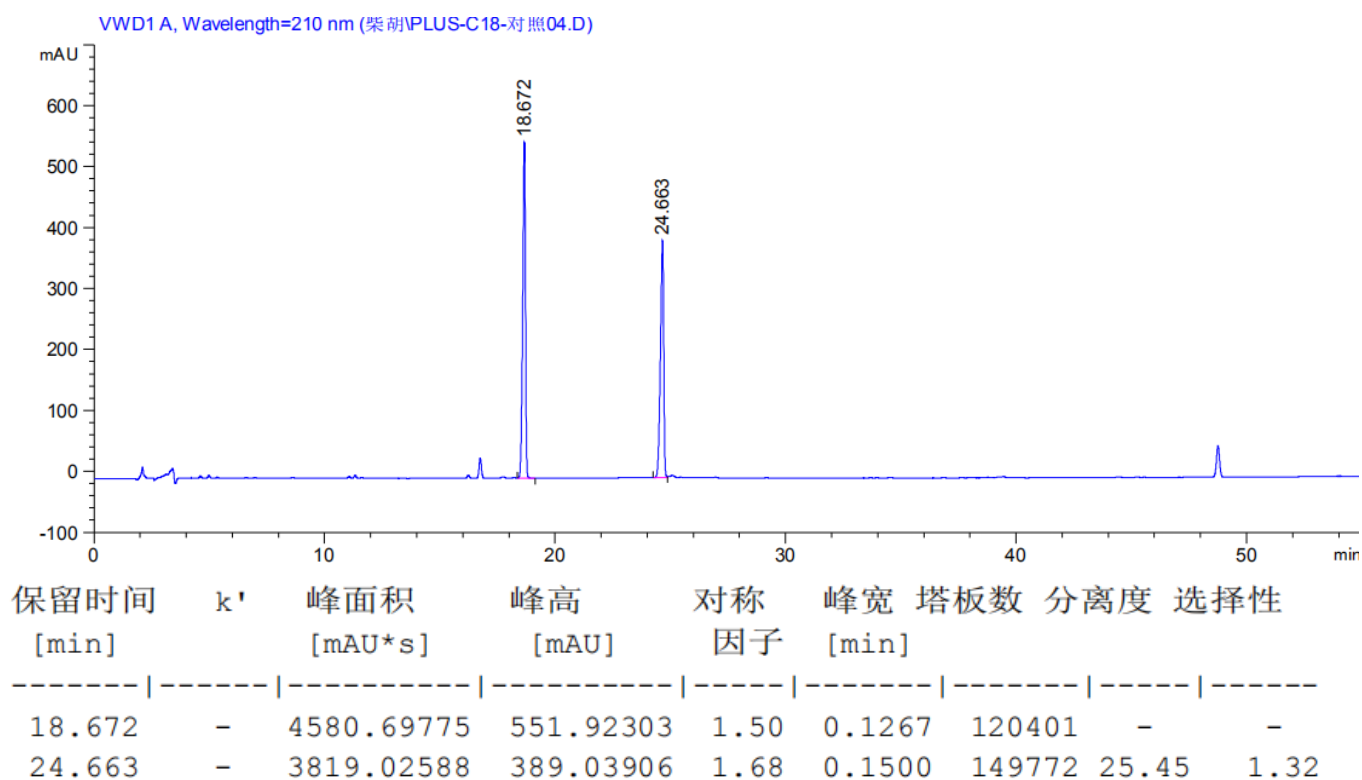

2、供试品溶液

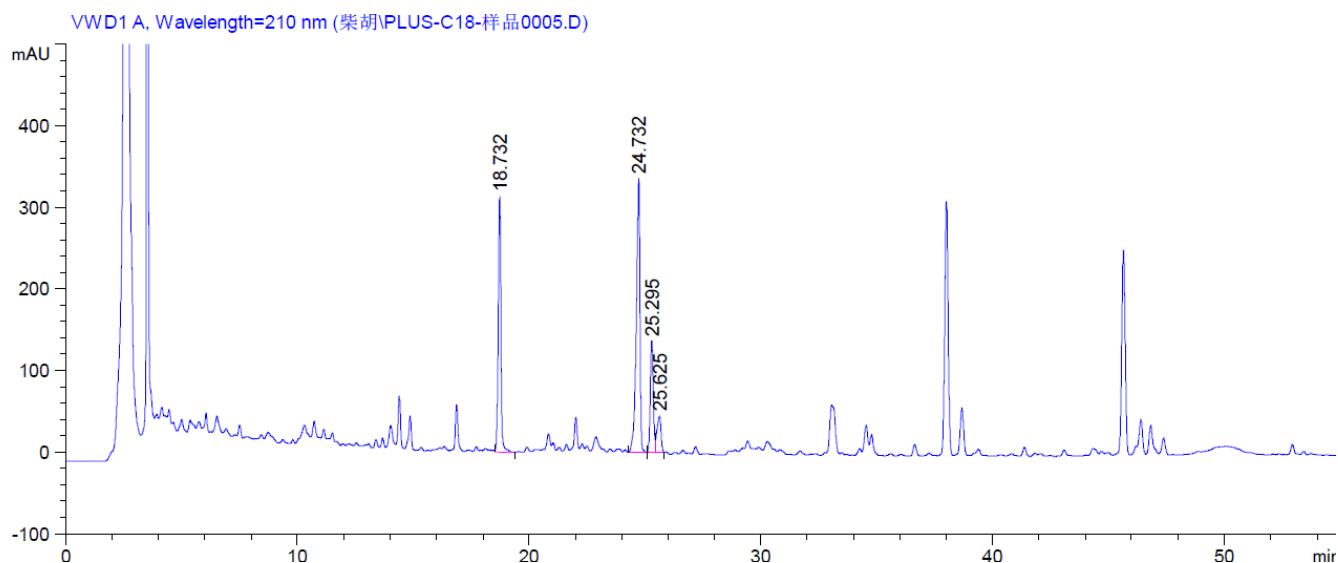

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969

邮编: 321000

E-mail: linglan@welchmat.com

保留时间 [min]	k'	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	对称 因子	峰宽 [min]	塔板数	分离度	选择性
18.732	-	2529.23657	312.85956	1.12	0.1204	134009	-	-
24.732	-	3649.13232	335.77155	1.87	0.1595	133221	25.18	1.32
25.295	-	1215.83630	136.47473	0.95	0.1375	187463	2.23	1.02
25.625	-	547.37073	44.67991	1.54	0.2100	82500	1.12	1.01

● 结论

月旭 Ultimate® Plus C18 (4.6×250mm , 5μm), 在该色谱条件下进行测定, 可以达到检测需求, 可用于此产品的检测。

报告签字

测试: 蓝灵

日期: 2019-05-10

审核: 郭德勇

日期: 2019-05-10